



## GLOREHA ARIA

Gloreha Aria è un dispositivo terapeutico sensorizzato per il trattamento riabilitativo dell'arto superiore.

Programmi personalizzati stimolano il paziente a muovere il braccio, il polso e le dita della mano in assenza di gravità.

Gloreha Aria è dotato di sensori ottici in grado di rilevare ogni movimento nello spazio: input che il software elabora e visualizza, coinvolgendo così il paziente in giochi motivanti e sfidanti.





## GLOREHA SINFONIA

Gloreha Sinfonia combina diversi strumenti a supporto della riabilitazione della mano e dell'arto superiore: un guanto robotico, stimolazione multisensoriale, sensori di movimento, supporti dinamici del braccio.

L'unione armonica di tali elementi fornisce una terapia adattabile alle specifiche esigenze cliniche del paziente: dalla mobilizzazione passiva delle dita a giochi interattivi, passando per task funzionali con oggetti reali e esercizi di mobilizzazione attivo-assistita.

Inoltre, il paziente può eseguire training bilaterale con schema mirror: il movimento eseguito dalla mano sana viene replicato dal guanto robotico sulla mano affetta.




# GLOREHA COLLEZIONE



Gloreha Collezione è la soluzione tecnologica più completa per il trattamento riabilitativo della mano e dell'intero arto superiore. Una combinazione modulare che accompagna il paziente durante tutto il percorso terapeutico, dalle fasi precoci a quelle più avanzate. La varietà e la versatilità di Gloreha Collezione permettono di costruire protocolli riabilitativi che rispondono agli obiettivi specifici della terapia.

Gloreha Collezione è la combinazione che raddoppia intensità ed efficacia del trattamento. Un terapeuta, due dispositivi riabilitativi: Gloreha Sinfonia e Gloreha Aria. I pazienti possono lavorare in modo autonomo o semiautonomo con una minima supervisione da parte del terapeuta.



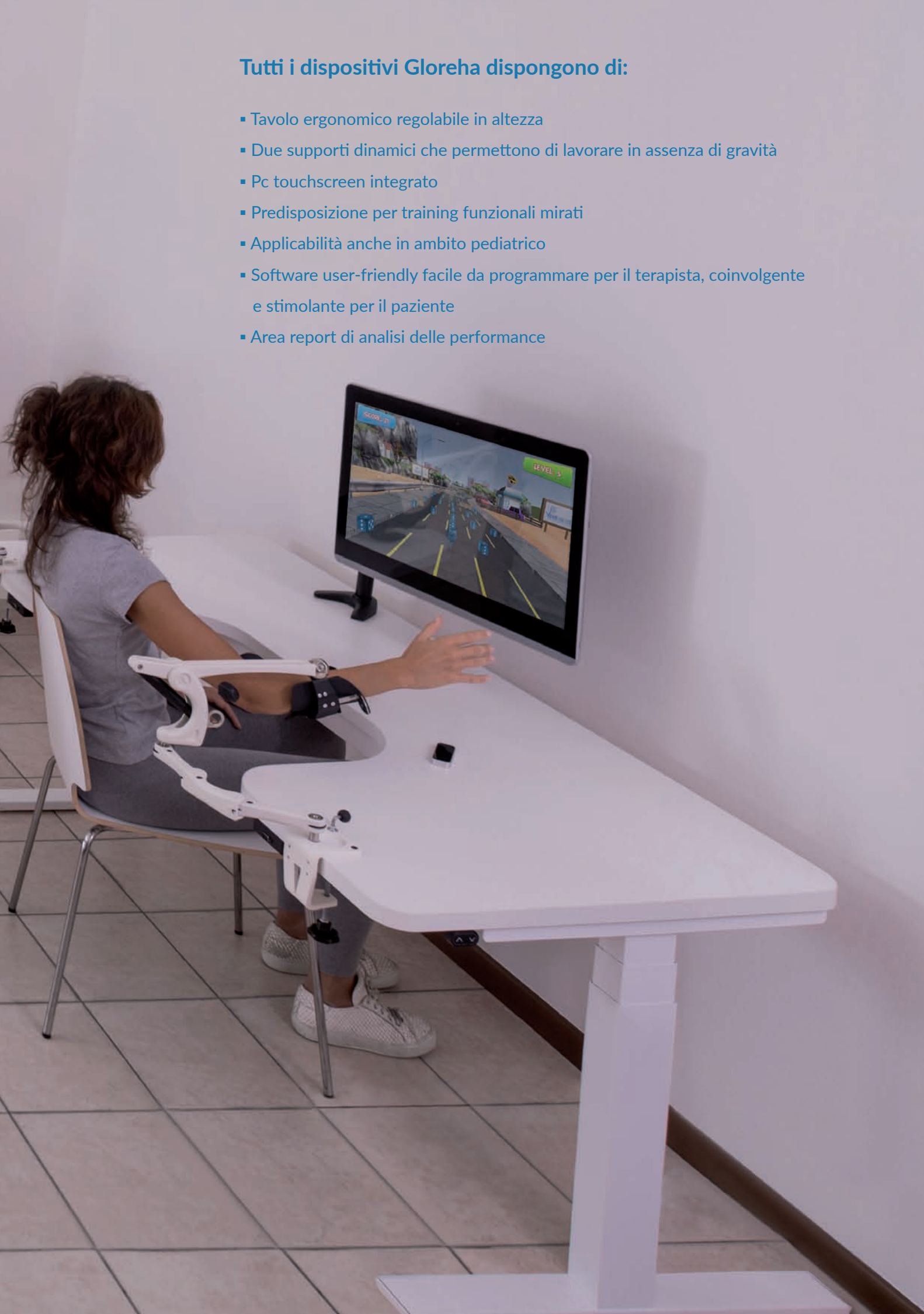











Tutti i dispositivi Gloreha dispongono di:

- Tavolo ergonomico regolabile in altezza
- Due supporti dinamici che permettono di lavorare in assenza di gravità
- Pc touchscreen integrato
- Predisposizione per training funzionali mirati
- Applicabilità anche in ambito pediatrico
- Software user-friendly facile da programmare per il terapeuta, coinvolgente e stimolante per il paziente
- Area report di analisi delle performance

QUALI DISPOSITIVI PER QUALI TERAPIE?

Grazie alla modularità e versatilità dei prodotti Gloreha, ospedali, centri di riabilitazione e palestre possono strutturare al meglio la propria dotazione tecnologica, integrandola e modificandola nel corso del tempo.

	GLOREHA ARIA	GLOREHA WORKSTATION	GLOREHA WORKSTATION PLUS	GLOREHA SINFONIA	GLOREHA SINFONIA PLUS	GLOREHA COLLEZIONE
 MOBILIZZAZIONE PASSIVA DELLA MANO		■	■	■	■	■
 ACTION-OBSERVATION THERAPY		■	■	■	■	■
 ESERCIZI FUNZIONALI		■	■	■	■	■
 COMPENSAZIONE PESO DEL BRACCIO	■	■	■	■	■	■
 MOBILIZZAZIONE ATTIVO-ASSISTITA DELLA MANO				■	■	■
 ESERCIZI BILATERALI DELLA MANO				■	■	■
 GIOCHI INTERATTIVI MANO	■		■	■	■	■
 GIOCHI INTERATTIVI POLSO	■		■		■	■
 GIOCHI INTERATTIVI BRACCIO	■		■		■	■
 DUE PAZIENTI CONTEMPORANEAMENTE						■

**IDROGENET SRL**

25065 Lumezzane (BS) ITALY

Phone/Fax +39.030.871932

[info@gloreha.com](mailto:info@gloreha.com)

[www.gloreha.com](http://www.gloreha.com)

